




SAY SKIN

The background of the entire page is a soft-focus photograph of a white beauty device, the SAY SKIN Aurora, lying on a white towel. The device has two circular buttons on its handle and a clear window. Next to it is a white tube of cream and a small glass jar. The overall aesthetic is clean and minimalist.

SAY SKIN

Saying Beauty

NỘI DUNG

- HỒ SƠ CÔNG TY
- TỔNG QUAN
- MÔ TẢ SẢN PHẨM
- TÀI LIỆU THAM KHẢO
- CÔNG NGHỆ CỐT LÕI
- CÁCH HOẠT ĐỘNG
- BẢNG SO SÁNH
- THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG
- HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- BẢNG SÁNG CHẾ VÀ CHỨNG CHỈ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền đối với tài liệu trên, thuộc về Công ty TNHH Withnix. Việc sử dụng, tiết lộ, sao chép và phân phối tài liệu này cho mục đích khác ngoài những gì đã được quy định sẽ vi phạm bí mật thương mại và quyền sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Withnix.

Company Profile

SAY SKIN



Tên công ty	WITHNIX Co., Ltd.
Ngày thành lập	01 Tháng Mười, 2003
Trụ sở	593-14, Opo-ro, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
Chi nhánh	WITHNIX Shenzhen Co., Ltd. (China)
Trang chủ	www.withnix.co.kr en.say-skin.com

Dongkook

X

WithNix

WITHNIX CO.,LTD là công ty con của công ty dược phẩm lớn tại Hàn Quốc, dược phẩm Dongkook.

Chúng tôi chia sẻ triết lý quản lý cốt lõi của công ty mẹ,
được dành riêng để đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc của khách hàng.

AURORA⁺

AURORA-*lite*



MÔ TẢ

AURORA⁺



THƯƠNG HIỆU	SAY SKIN
DANH MỤC / SẢN PHẨM	Thiết bị làm đẹp /AURORA+
LỢI ÍCH CHO DA	<ul style="list-style-type: none">• KHUYẾN KHÍCH HẤP THU MỸ PHẨM• Tăng cường hấp thu các thành phần hiệu quả của da là những sản phẩm giúp bảo vệ mạnh mẽ cho lớp hạ bì. <p>* CHĂM SÓC RẮC RỐI Giải quyết các vấn đề về rắc rối và kích ứng da do Tiếp xúc với các chất ô nhiễm, chẳng hạn như bụi mịn, một lần và mãi mãi.</p> <p>* ĐIỀU TRỊ NẾP NHĂN & SẼN CHẮC DA Giúp làm săn chắc da và giảm nếp nhăn.</p> <p>* LÀM TRẮNG VÀ LÀM ĐỀU MÀU DA Cải thiện làn da xỉn màu và nhược điểm trên da và cung cấp Một hiệu ứng làm trắng da mạnh mẽ.</p>
CÔNG NGHỆ	Plasma, Microcurrent
VẬT LIỆU	[Body] PC+ABS / [Heads] Zirconia ceramic
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG	47.0(W) * 184.5(L) * 56.1(H)mm / 185g
LOẠI NGUỒN ĐIỆN	DC 5V, 1A (USB-C type)
PIN	Li-Polymer Battery 1,000mAh
CHỨNG NHẬN	KC, CE, FCC
NƯỚC SẢN XUẤT	Republic of KOREA
MÀU	WHITE, BLACK

MÔ TẢ

AURORA-*lite*



THƯƠNG HIỆU	SAY SKIN
DANH MỤC / SẢN PHẨM	Thiết bị làm đẹp/ AURORA-lite
LỢI ÍCH CHO DA	<ul style="list-style-type: none">• KHUYẾN KHÍCH HẤP THU MỸ PHẨM• Tăng cường hấp thu các thành phần hiệu quả của da là những sản phẩm giúp bảo vệ mạnh mẽ cho lớp hạ bì. <p>* CHĂM SÓC RẮC RỐI Giải quyết các vấn đề về rắc rối và kích ứng da do Tiếp xúc với các chất ô nhiễm, chẳng hạn như bụi mịn, một lần và mãi mãi.</p> <p>* ĐIỀU TRỊ NẾP NHĂN & SĂN CHẮC DA Giúp làm săn chắc da và giảm nếp nhăn.</p> <p>* LÀM TRẮNG VÀ LÀM ĐỀU MÀU DA Cải thiện làn da xỉn màu và nhược điểm trên da và cung cấp một hiệu ứng làm trắng da mạnh mẽ.</p>
CÔNG NGHỆ	Plasma
VẬT LIỆU	[Body] PC+ABS, Aluminum / [Heads] Zirconia ceramic
KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG	30.3(W) * 155(L) * 52(H)mm / 103g
LOẠI NGUỒN ĐIỆN	DC 5V, 1A (USB-C type)
PIN	Li-Polymer Battery 700mAh
CHỨNG NHẬN	KC, CE, FCC, CVC
NƯỚC SẢN XUẤT	Republic of KOREA
MÀU	WHITE, PINK

Kiểm tra thẩm mỹ để cải thiện vấn đề về da

*Sử dụng AURORA+ với serum trong 10~13 phút mỗi ngày



- Đối tượng : Một cậu bé khoảng 10 tuổi / Trán và má
- Giải pháp : 7 lần với giải pháp
- Kết quả: So sánh các thay đổi trước và sau khi chăm sóc với dung dịch trên mặt

Kiểm tra thẩm mỹ để cải thiện vấn đề về da

*Sử dụng AURORA+ với serum trong 10~13 phút mỗi ngày



- Đối tượng : Một phụ nữ ở độ tuổi 20 / Trán và má
- Giải pháp : 12 lần với giải pháp
- Kết quả: So sánh các thay đổi trước và sau khi chăm sóc với dung dịch trên mặt

Kiểm tra thẩm mỹ để cải thiện vấn đề về da

*Sử dụng AURORA+ với serum trong 10~13 phút mỗi ngày



- Đối tượng : Một phụ nữ ở độ tuổi 30 / Trán và má
- Giải pháp : 13 lần với giải pháp
- Kết quả: So sánh các thay đổi trước và sau khi chăm sóc với dung dịch trên mặt

Tự kiểm tra khả năng hấp thụ của mỹ phẩm



VS



* Kết quả: Serum được hấp thụ ngay vào da được chăm sóc bằng AURORA-lite.

PLASMA



Vật liệu tiên tiến, thuộc thế hệ thứ 4, đã được chứng minh là an toàn cho cơ thể con người.

- Thúc đẩy tái tạo da.
- Hiệu quả khử trùng mạnh.
- Thúc đẩy hấp thụ mỹ phẩm.

MICROCURRENT



Một xu hướng lớn của thiết bị làm đẹp.

- Thúc đẩy độ đàn hồi của da và thu nhỏ lỗ chân lông.
- Thúc đẩy sự trao đổi chất vật lý.

ZIRCONIA




Một loại gốm an toàn và thân thiện với môi trường.

- Một loại gốm có độ bền cao, chính xác và thân thiện với môi trường để nhấn mạnh sự an toàn.

Dòng điện siêu nhỏ

Plasma tạo ra

* Giảm nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi của da

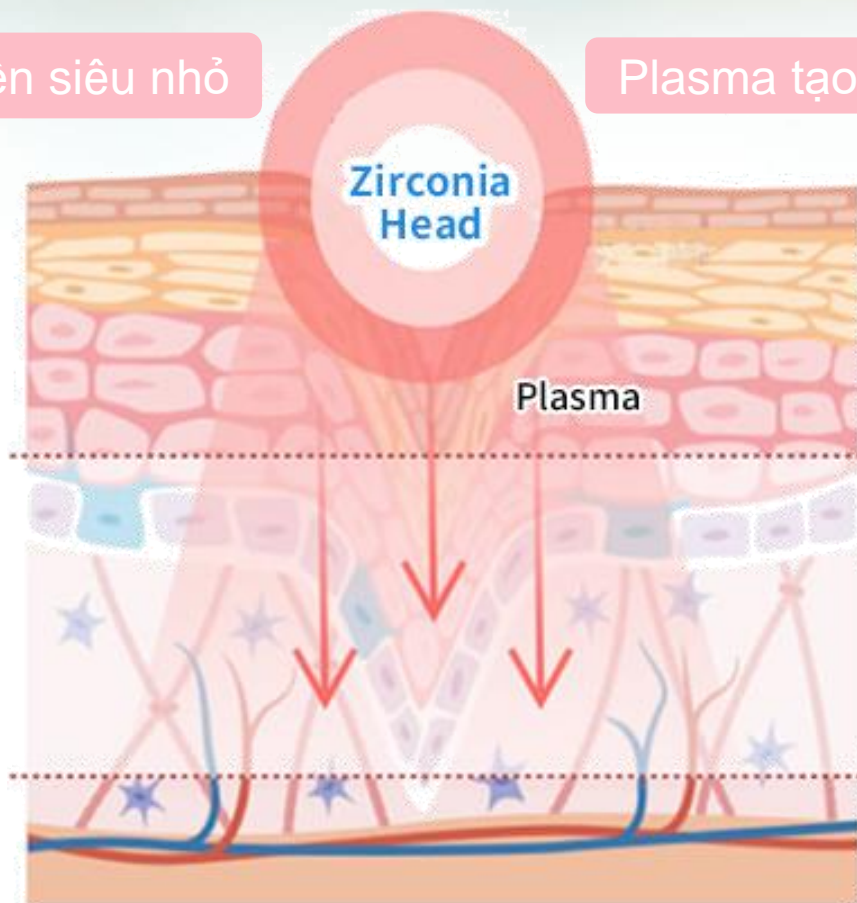


Biểu bì

Lớp
biểu bì

Hạ bì


Da lão hóa
Elastin và collagen bị đứt gãy.

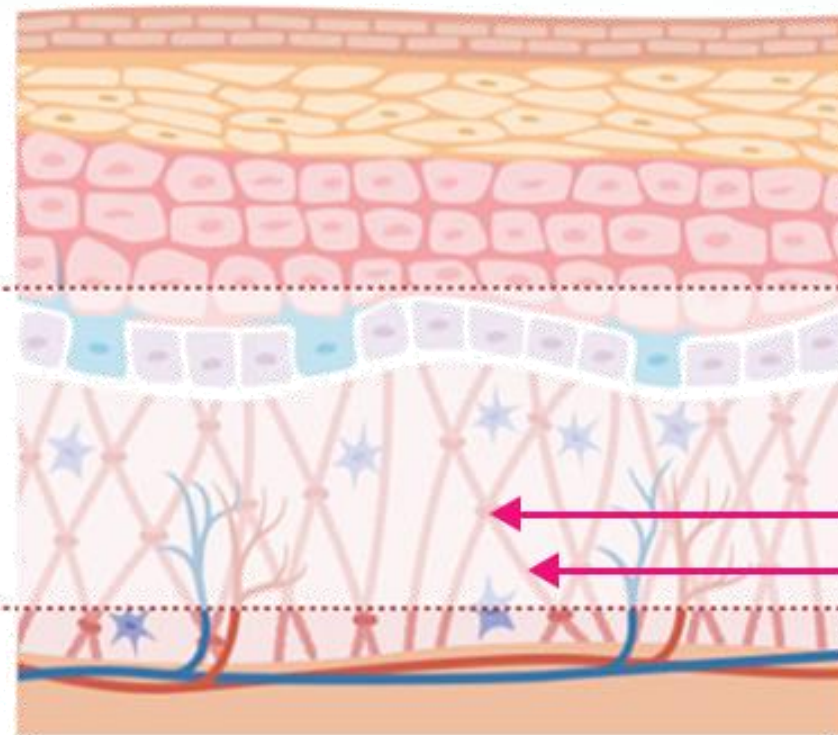

Collagen
Đàn hồi

Da trẻ
Elastin và collagen được liên kết đều
và có tính tổ chức.


Cách thức hoạt động

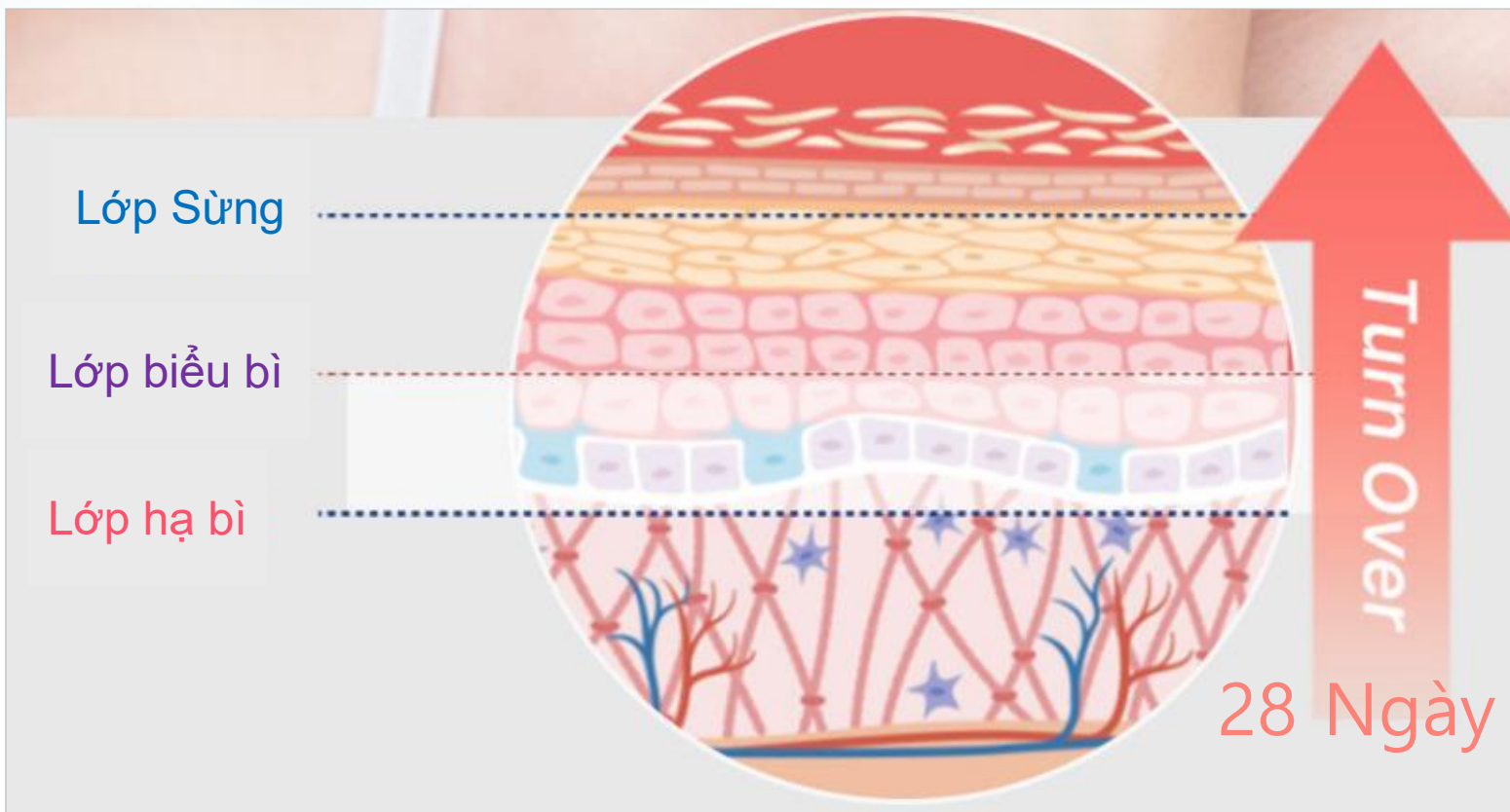

Làm trắng và cải thiện kết cấu da

Plasma gây ra sự bong vảy giúp loại bỏ khối lượng keratin, tế bào keratin chết và các loại chất gây ô nhiễm khác nhau.

Trước

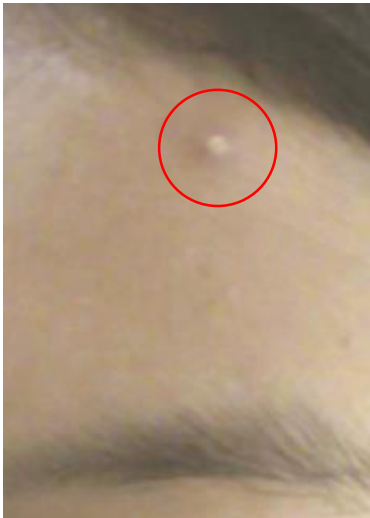

Sau



Nguồn: Plasma không nhiệt cho việc cải thiện mụn và thẩm mỹ da.

* Làm cho các vấn đề về da trở nên tốt hơn

Một nhóm hydroxyl (gốc OH), một chất tự nhiên oxy-anion được tạo ra khi plasma được tạo ra, có khả năng khử trùng mạnh nhất trên trái đất.


Khử trùng, khử mùi và phân hủy bằng cách trực tiếp tham gia vào các chất gây ô nhiễm trong không khí và nước.

Tốc độ diệt trùng 2.000 lần và nhanh hơn 180 lần so với ozone và tia UV mặt trời

Màng tế bào



Before
Plasma
Pulse

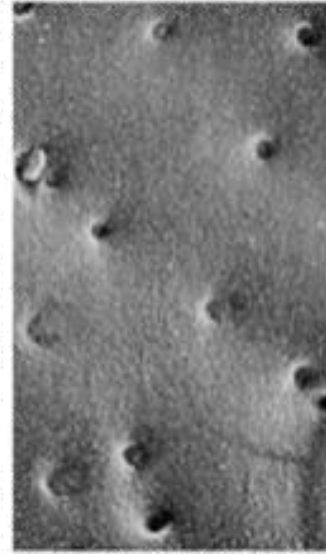

During
Plasma
Pulse









After
Plasma
Pulse

* Cải thiện khả năng hấp thụ các hoạt chất mỹ phẩm của da

"Plasmaporation = Plasma + Electroporation"

** Điện poration: việc tạo ra các lỗ chân lông thoáng qua trong màng tế bào, thông qua việc áp dụng xung điện áp cao.*

So sánh với các đối thủ cạnh tranh

Mẫu Tên	SAY SKIN AURORA ⁺		SAY SKIN AURORA- <i>lite</i>	NuFace Trinity	MEDICUBE Age-r Booster Pro	LG Pra.L LED Mask	Dual Sonic Maximum
Hình ảnh							
Quốc gia	WITHNIX / KOREA			USA	KOREA	KOREA	KOREA
Công nghệ	PLASMA, MICROCURRENT, PLASMA-PORATION, GUASHA	PLASMA, PLASMA-PORATION		MICROCURRENT, GUASHA	MICROCURRENT, ELECTROPORATION, LED	LED	HIFU, RF, MICROCURRENT, LED
Hiệu quả	Quảng cáo mỹ phẩm hấp thụ, đàn hồi, làm trắng, Chăm sóc rắc rối (ví dụ: viêm da dị ứng/mụn trứng cá) v.v			Hiệu quả lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi Whitening Khuyến khích hấp thụ mỹ phẩm, Hoạt động collagen	Hiệu quả lưu thông máu, cải thiện độ đàn hồi Whitening Khuyến khích hấp thụ mỹ phẩm, Hoạt động collagen	Chống lão hóa	Whitening Khuyến khích hấp thụ mỹ phẩm, Cải thiện độ đàn hồi
MSRP	\$ 250	\$ 145		\$ 260	\$ 290	\$ 510	\$ 1,100

So sánh với các đối thủ cạnh tranh(Thiết bị plasma)

Nguồn: Bộ phận nghiên cứu và phát triển Withnix

1.

Phân mục	Pla Beau	AURORA ⁺
Số xung mỗi giây	3,609	4,200
Số xung mỗi giây / Tốc độ	85%	100%
Vrms của mỗi xung	545	590
Vrms của mỗi xung / Tốc độ	92%	100%
Tổng tỷ lệ năng lượng tạo PLASMA	79%	100%
	100%	126%

* Trong khi số lượng hoặc cường độ của plasma được tạo ra không thể đo trực tiếp, năng lượng cần thiết cho Tạo huyết tương có thể được coi là thay đổi tùy theo đến tiềm năng áp dụng cho bề mặt đầu. Do đó, nó được coi là hợp lệ để đánh giá bằng cách so sánh Các giá trị năng lượng điện đo được trên bề mặt đầu.

KẾT LUẬN

Nguồn cung cấp AURORA+ mạnh hơn 1,259 lần năng lượng tạo plasma so với Pla Beau.

2.

Phân mục	Plasma Shower	AURORA ⁺
Số xung mỗi giây	5,152.5	4,200
Số xung mỗi giây / Tốc độ	122%	100%
Vrms của mỗi xung	350	590
Vrms của mỗi xung / Tốc độ	59%	100%
Tổng tỷ lệ năng lượng tạo PLASMA	72%	100%
	100%	137%

KẾT LUẬN

Nguồn cung cấp AURORA+ mạnh hơn 1,373 lần năng lượng tạo plasma so với Plasma Shower.

SAY SKIN

Thử nghiệm lâm sàng

KIỂM TRA AURORA+

- Tổ chức lâm sàng : Viện Khoa học Da liễu Hàn Quốc
- Thời gian lâm sàng: 6 tuần
- Đối tượng thử nghiệm: 21 người, nữ tuổi 40~69 tuổi
- Mục đánh giá: Nâng vùng túi mắt dưới mắt, nâng vùng mũi, nâng mắt, đàn hồi da, mật độ da, tông màu da



KIỂM TRA AURORA LITE

- Viện lâm sàng : H&Bio SRC
- Giai đoạn lâm sàng: Ngày 7 ~ 21 tháng 6 năm 2021 (2 tuần)
- Đối tượng kiểm nghiệm: Dermalab Full Skin 3cm x 3cm / Acetyl-Hexapeptide-8 (Lys-FITC)
- Mục đánh giá: Khả năng hấp thụ hoạt chất mỹ phẩm
- Cơ sở lâm sàng: OATC
- Thời gian lâm sàng: 2 tuần
- Đối tượng lâm sàng: 22 người, nữ từ 30~60 tuổi
- Mục đánh giá: Tác dụng của độ đàn hồi da đối với AURORA-lite với ống


Tác dụng của việc nâng da

REF. Màu da được cải thiện: Vàng (tốt nhất) > Xanh lá cây > Xanh dương > Tím (tệ nhất)

Dưới túi mắt

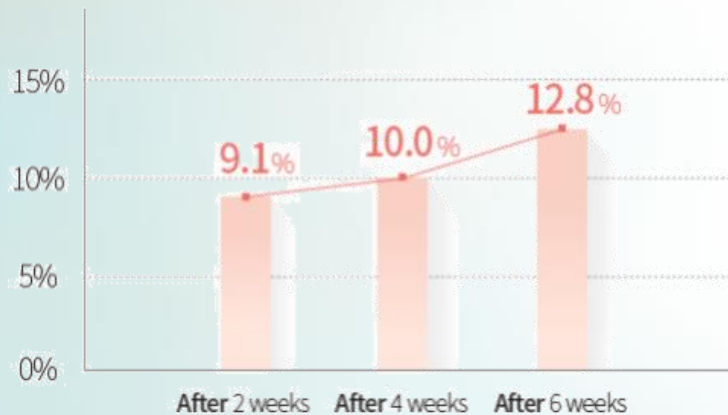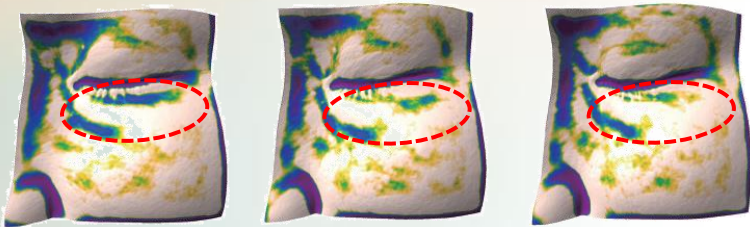


Nếp gấp mũi

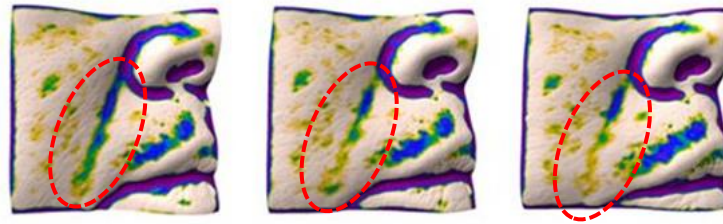


Before use Immediately after use 6 weeks after use



Chân chim

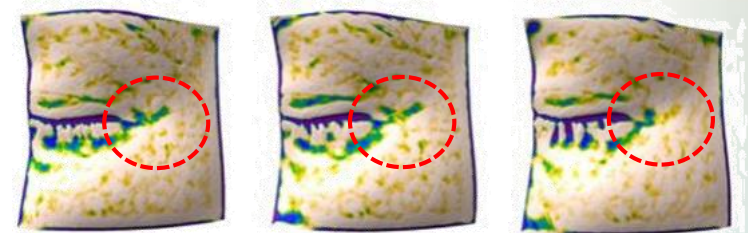


Before use Immediately after use 6 weeks after use

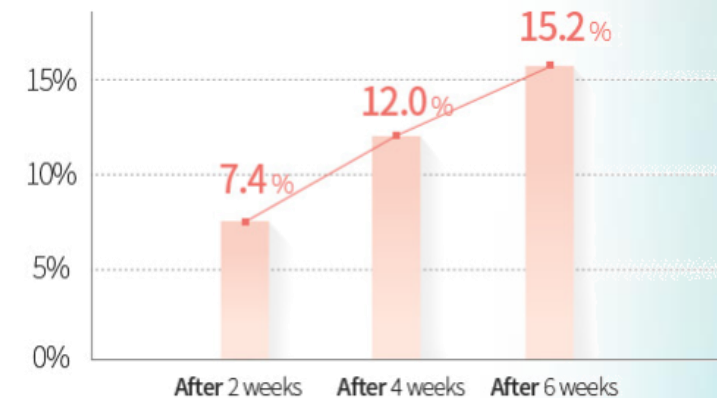


Tác dụng của


Mật độ da

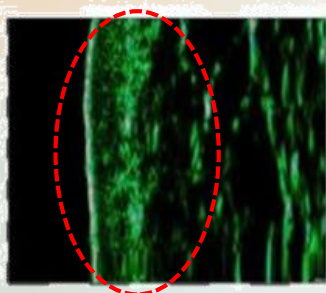


Before use

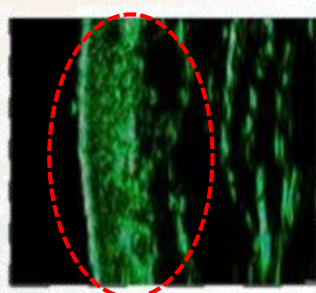


6 weeks after use

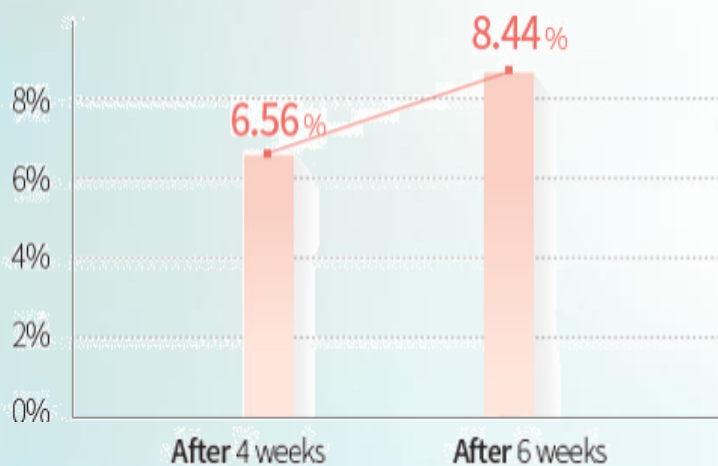

Độ đàn hồi của da


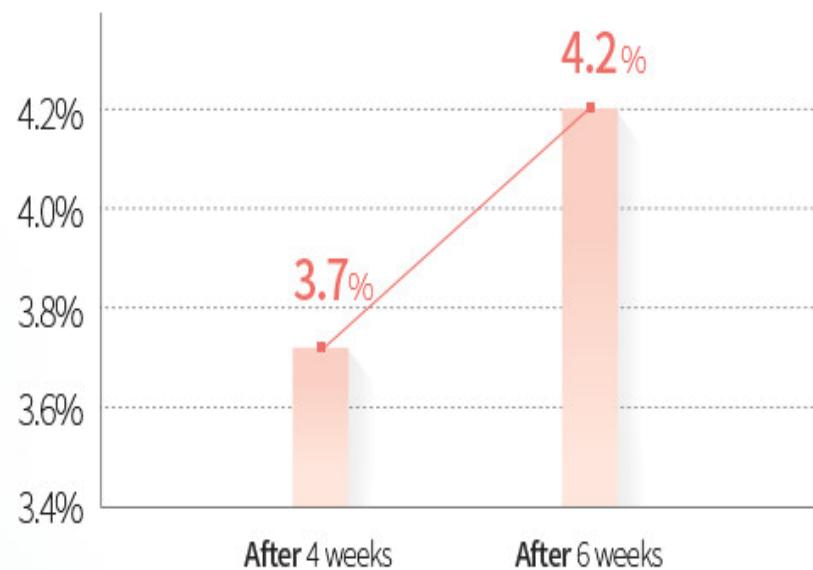


Màu da

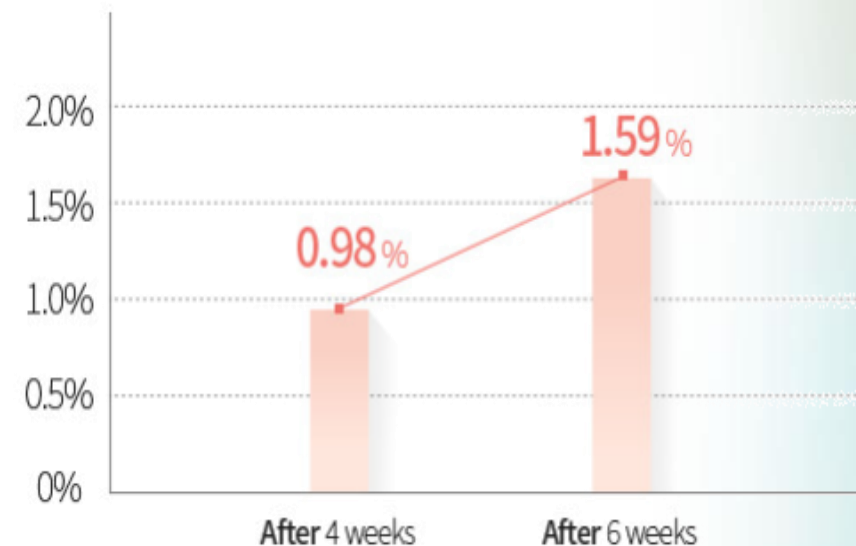

Khả năng hấp thụ hoạt chất mỹ phẩm

* So sánh sự hấp thụ da ex vivo mô da người

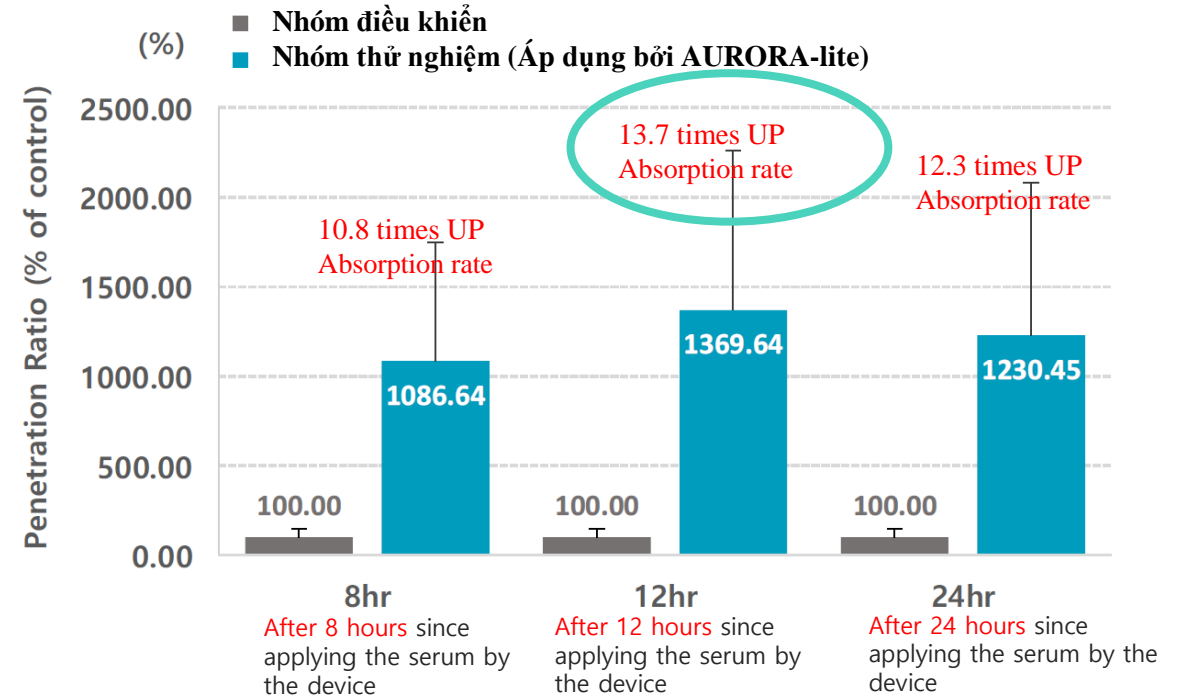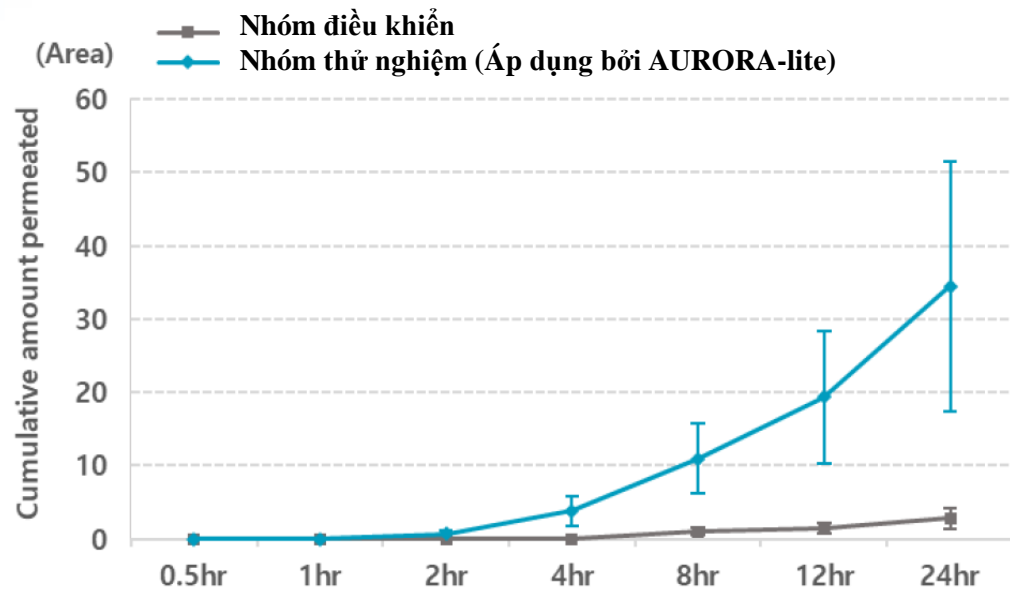


* Nhiều hơn được hấp thụ các thành phần hoạt tính của huyết thanh vào da bằng thiết bị hơn là thoa serum bằng tay như dưới đây.

Khả năng hấp thụ hoạt chất mỹ phẩm


Sau 1 giờ

Nhóm bằng tay

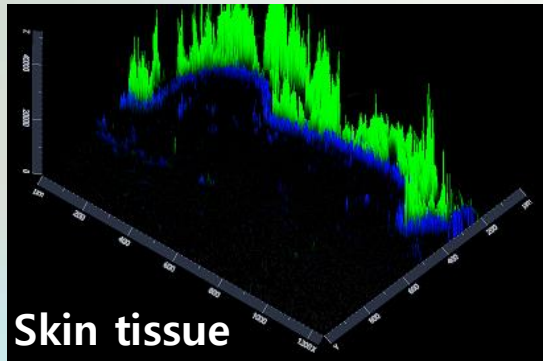

VS

Nhóm của AURORA-lite

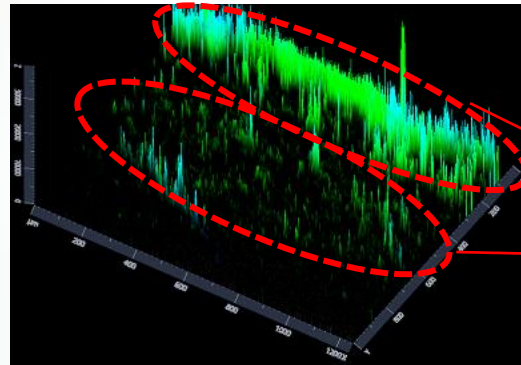


Epidermis

Dermal Layer


Sau 24 giờ

Nhóm bằng tay

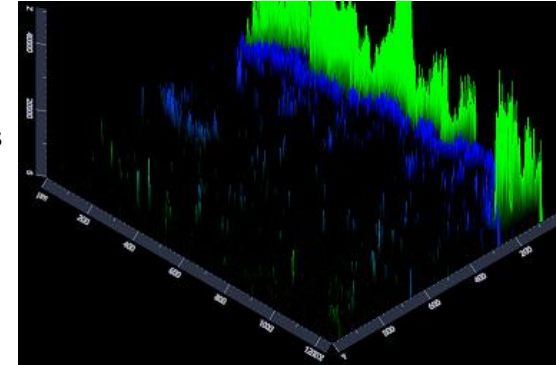

VS


Nhóm của AURORA-lite

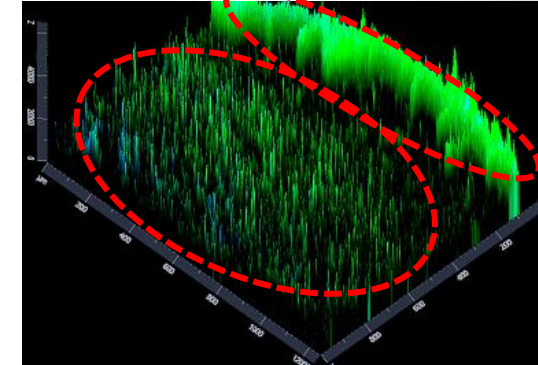

REF. Chất trong màu xanh lá cây giống như một hoạt chất mỹ phẩm.

Tác dụng của độ đàn hồi của da


* So sánh cải thiện độ đàn hồi của da

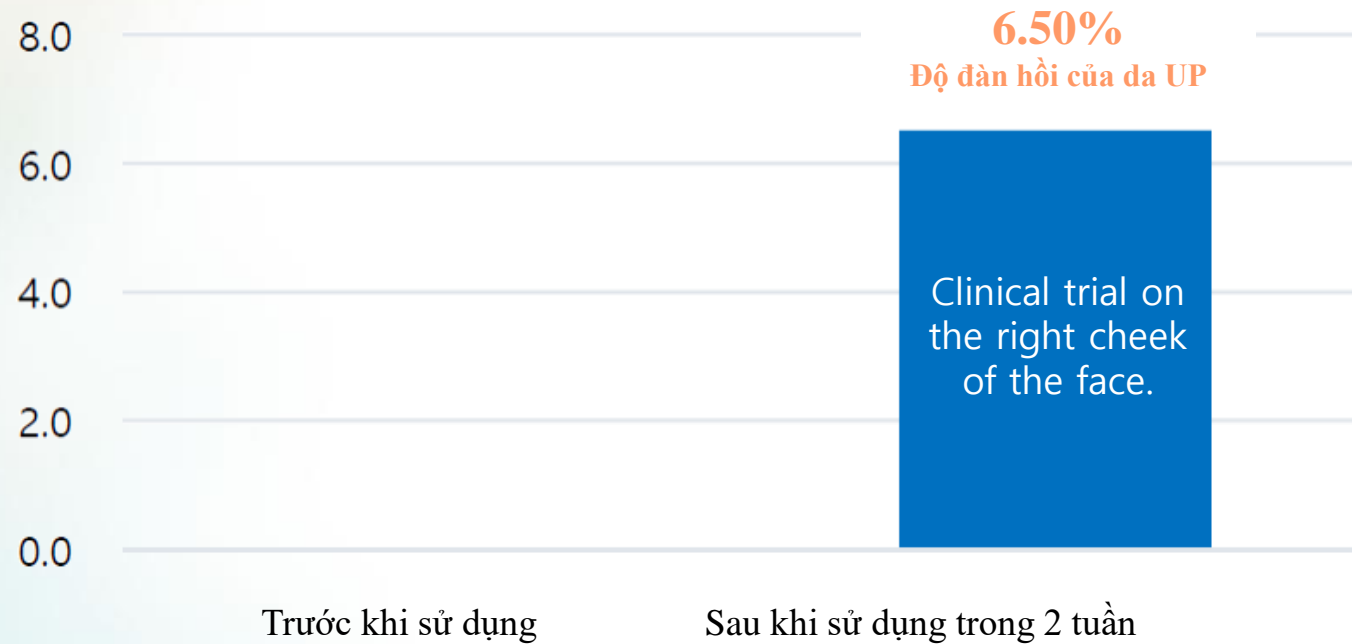


Khảo sát sau lâm sàng

SAY SKIN

Q1. Skin Abnormalities 0%

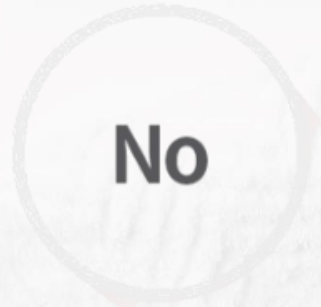

Q2. Satisfaction with the effect 95.2%

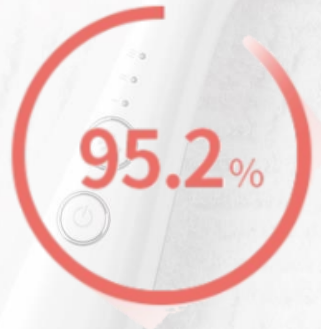

Q3. Overall satisfaction with feeling of use 95.2%



Q4. Ease of use 100%



Q5. Convenience of maintenance, management and storage 100%



* Kết quả khảo sát sau lâm sàng cho thấy **mức độ hài lòng cao** với sản phẩm này.

Chất liệu & Thiết kế

SAY SKIN

HEAD

- ✓ Sử dụng Zirconia, một loại vô hại và vật liệu thân thiện với môi trường.
- ✓ Một cảm giác mát mẻ làm giảm sự ẩm áp trong quá trình massage da.
- ✓ Tối ưu hóa cấu trúc khoảng cách và góc giữa các đầu và kích thước bóng đầu cần chăm sóc các vùng cong như đường viền hàm, cô dâu mũi, xương gò má.

BODY

- ✓ Vật liệu PC + ABS an toàn.
- ✓ Xử lý mã hóa tia cực tím ngăn ngừa bề mặt xuống cấp bởi mỹ phẩm.
- ✓ Tối ưu hóa thiết kế thân dài với một cấu trúc được sắp xếp hợp lý và Nắm để chăm sóc cho tất cả các bộ phận của cơ thể chẳng hạn như gáy, sau gáy và xương đòn.



Operation Button

- ✓ Với các nút bấm và màn hình nằm ở mặt trước, thiết kế giao diện người dùng tiện lợi để thao tác bằng một ngón tay cái trong khi cầm sản phẩm.

Chăm sóc đặc biệt theo khu vực cụ thể

- **Chăm sóc vùng mắt**

Nhắm mắt lại và sử dụng một hoặc hai quả bóng dầu, di chuyển chúng qua lại dưới mắt đến túi mắt.

- **Chăm sóc cổ**

Tránh vùng tuyến giáp ở phía trước cổ, vui lòng sử dụng các quả bóng dầu theo chuyển động hướng lên từ dưới lên trên.

- **Chăm sóc trán**

Hãy sử dụng nó trong một chuyển động lặp đi lặp lại từ đường lông mày đến chân tóc, di chuyển lên trên từ dưới lên trên.

- **Chăm sóc má**

Hãy chăm sóc cho các quả bóng dầu bằng cách di chuyển từ trái sang phải và từ trong ra ngoài theo chuyển động lặp đi lặp lại.

- **Chăm sóc đường viền hàm**

Sử dụng các quả bóng dầu theo hướng hướng lên trên từ dưới lên trên dọc theo đường viền hàm.



#HOW TO USE AURORA⁺



01

Hãy vệ sinh da sau khi rửa mặt. Loại bỏ hết độ ẩm còn sót lại trên da



02

Hãy thoa đều các sản phẩm chăm sóc da



03

Vui lòng kích hoạt nút nguồn



04

Vui lòng chọn mức độ mong muốn và sử dụng trên các vùng khác nhau trong khoảng 5 đến 10 phút.

Bằng sáng chế & Giấy chứng nhận

SAY SKIN



CE E FC



GOOD DESIGN

KC

Tiêu đề sáng chế
"Thiết bị plasma áp suất khí quyển có chức năng
cung cấp vi dòng"

Tiêu đề sáng chế
"Thiết bị làm đẹp di động sử dụng huyết tương"

CẢM ƠN BẠN

Quản lý xuất khẩu : Chan Woo

Jung

Email : chan@withnix.co.kr

Mobile : +82-10-3585-0464

Whatsapp : ChanWithnix

Wechat : ChanWithnix

Trực tiếp.070-4338-3831

Withnix Co. Ltd /

<http://en.say-skin.com/>

<https://www.youtube.com/@sayskinbeautycare7628/>

© 2024 WITHNIX. All rights reserved